

Materiał do wypełniania i odbudowy kanałów korzeniowych

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PONIŻSZĄ INSTRUKCJĄ
WYRÓB DO STOSOWANIA WYŁĄCZNIE PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA

SKŁAD:

Tlenek wapnia oraz tlenki: krzemu, żelaza, glinu, sodu, potasu, bizmutu, magnezu, fosforan wapnia.

PRZEZNACZENIE

Wyrób przeznaczony jest do stosowania w trakcie leczenia stomatologicznego jako materiał do wypełniania i remineralizacji kanałów korzeniowych. Po zmieszaniu z wodą wiąże po upływie 6-10 minut.

MTA+ jest wskazany szczególnie w przypadkach:

- zmian demineralizacyjnych korzenia,
- do wypełniania wstecznego wierzchołka korzenia,
- przy bezpośrednim pokryciu miazgi,
- podczas zabiegu amputacji miazgi,
- w leczeniu zębów z niepełnym rozwojem korzenia.

Wyrób ma działanie remineralizacyjne na tkanki twarde zęba, stanowi szczelne zabezpieczenie kanału korzeniowego.


MTA+ nie należy stosować jako samodzielnego stałego wypełnienia kanału.

SPOSÓB UŻYCIA

Zawartość całej folki szklanej oznakowanej *MTA+ powder* oraz 1-2 krople płynu z pipety oznakowanej *MTA+ liquid* umieścić na płytce do zarabiania.

Mieszać przez ok. 30 sekund do konsystencji mokrego piasku. Jeśli materiał jest zbyt gęsty lub kruchy należy dodać kolejną kroplę płynu (lub wody destylowanej).

Umieścić preparat w wybranym miejscu za pomocą nakładacza.

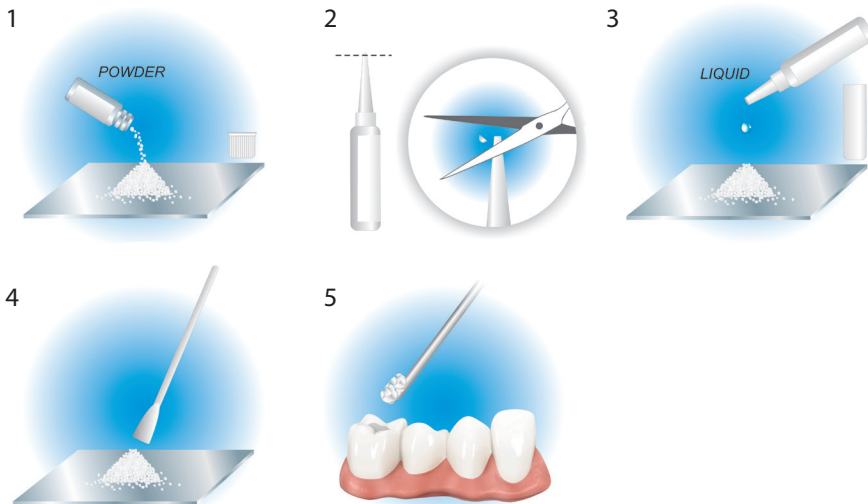

Stosować preparat jedynie po ustąpieniu objawów ostrych, ponieważ kwasowe pH zaburza wiązanie MTA+.

Kontakt z wilgocią, również krwią przyspiesza wiązanie preparatu.

Opakowanie *MTA+ powder* zawiera dawkę do jednorazowego wykorzystania.

Po zmieszaniu z płynem *MTA+ liquid* (lub wodą destylowaną) należy zużyć przygotowaną dawkę w ciągu max. 10 minut.

Po tym czasie preparat nie nadaje się do użycia ze względu na postępujące wiązanie i twerdnienie powstałej masy.

Opakowanie *MTA+ liquid* po otwarciu należy zużyć w ciągu 12 miesięcy.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować u pacjentów z nadwrażliwością na składniki preparatu.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Wyrób może powodować uszkodzenie oka.

Działa drażniąco na błony śluzowe jamy ustnej, skórę i oczy. W razie kontaktu natychmiast spłukać dużą ilością wody i skontaktować się z lekarzem.

W razie spożycia nie zmuszać do wymiotów. Wypić dużą ilość wody. Skontaktować się z lekarzem.

Podczas pracy z wyrobem należy stosować koferdam, rękawiczki jednorazowe i okulary ochronne.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w temperaturze do 25 °C.

Chronić przed wilgocią.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Termin przydatności do użycia znajduje się na opakowaniu bezpośrednim.

POSTĘPOWANIE Z OPAKOWANIAMI PO WYROBIE

Zużyte opakowania należy przekazać do utylizacji lub zwrócić do wytwórcy.

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

- MTA+ MINI - 3 szt. proszku *MTA+ powder* (0,14 g) + 1 szt. płynu *MTA+ liquid* (1ml)
- MTA+ STANDARD - 6 szt. proszku *MTA+ powder* (0,14 g) + 1 szt. płynu *MTA+ liquid* (1ml)
- MTA+ MAXI - 10 szt. proszku *MTA+ powder* (0,14 g) + 1 szt. płynu *MTA+ liquid* (1ml)
- MTA+ PRO - 10 szt. proszku *MTA+ powder* (0,14 g) + 1 szt. płynu *MTA+ liquid* (1ml) + MATRIX MTA+



OSTRZEŻENIE. ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ UŻYCIA



NAJWYŻSZA DOPUSZCZALNA TEMPERATURA DO 25 °C



CHRONIĆ PRZED WILGOCIĄ



NIE UŻYWAĆ POWTÓRNIE



PPH CERKAMED Wojciech Pawłowski
37-450 Stalowa Wola, Polska
ul. Kwiatkowskiego 1
Tel/fax 0048 15 842-35-85