

One-Stop은 치은열구 내에 도포하여 출혈 및 치은열구액을 제거하고, 일시적으로 치은열구를 확장시켜 정확하고 명확한 인상 채득을 돕는 페이스트 타입의 치료용 인상전 처치제입니다.

■ 사용범위

1. 구강 내 치은열구의 국소 지혈 및 수분 제거가 필요한 경우
2. 보철 인상 채득 또는 수복 전 처치용
3. 치은 퇴축 코어 제작 전
4. 수복물 접착 시술 전 시야 확보를 위하여 사용

■ 성분

알루미늄 클로라이드 기반의 수렴제

■ 사용방법

1. 사용 전 준비사항

- ① 사용 전, 제품의 유효기간, 이물질 및 불순물 여부, 변질 등 제품의 이상 상태를 확인하십시오.
- ② 제조자의 사용 설명서를 숙지한 후 사용 방법을 준수하여 주십시오.
- ③ 환자에게 시술할 준비가 되면 본 제품의 캡을 제거하여 주십시오.
- ④ 시술 전 반드시 기도를 보호할 장치를 사용하여 주십시오.

2. 사용방법

1) 적용부위

- ① 제품을 적용할 부위(치은열구 및 주변 치은 조직)의 상태를 확인합니다.
- ② 필요 시 구강 내 이물질, 혈액, 진액 등을 부드럽게 제거하여 깨끗하게 합니다.
- ③ 시술 부위에 활동성 감염, 중증 염증 또는 궤양이 없는지 확인 합니다.
- ④ 제품은 1회용 주사기형 시린지 형태로 제공되며, 팁을 주사기에 연결합니다.

2) 제품적용

- ① 준비된 One-Stop을 팁을 사용하여 사용부위에 천천히 도포합니다.
- ② 제품이 치은열구 내 충분히 채워질 정도로 도포하되, 과도한 주입은 피합니다.
- ③ 필요한 경우, 소량을 추가 주입하여 치은열구를 균일하게 커버하도록 합니다.

3) 적용시간

- ① 제품 도포 후 약 2-3분간 그대로 유지합니다.
이 시간 동안 제품은 치은열구 내 진액 및 경미한 출혈을 흡수하고, 수렴작용을 통해 일시적 치은열구 확장을 유도합니다.

4) 제품 제거

- ① 2-3분이 경과하면, 제품 잔류물을 깨끗한 물 또는 생리식염수로 충분히 세척합니다.
 - ② 가벼운 수압으로 세척하여 치은열구 내 모든 제품 잔여물이 제거되도록 합니다.
 - ③ 제품이 남아있을 경우, 석션팁이나 에어-워터 스프레이를 사용하여 제거 합니다.
- 5) 후처리
- ① 제품의 세척이 완료된 후, 인상재로 인상 채득을 진행합니다.
 - ② 필요 시 구강 내를 다시 확인하여 점막 손상이나 과민반응이 없는지 확인합니다.
 - ③ 사용이 끝난 제품 및 팁은 재사용하지 않고, 의료폐기물로 폐기합니다.

■ 금기사항

1. 본 제품의 구성 성분(예: 염화알루미늄)에 대해 과민 반응 또는 알레르기 병력이 있는 환자에게 사용하지 마십시오.
2. 활동성 감염, 중증 치주염, 치은 궤양 또는 개방성 상처가 있는 부위에는 사용하지 마십시오.
3. 3세 이하 유아 및 면역기능이 심각하게 저하된 환자에게는 사용하지 마십시오.
4. 동봉된 팁의 재사용은 교차감염을 발생시킬 수 있으니, 팁의 재사용을 금합니다.

■ 주의사항

1. 본 제품은 '의료기기'입니다.

2. 본 제품에 대해 발진 및 피부염 등의 과민성 병력이 있는 환자에게는 사용하지 마십시오.
3. 본 제품은 구강 조직에만 사용함으로써, 눈에 들어가지 않도록 주의하십시오.
4. 본 제품 사용 중 발진 등의 과민증상이 나타난 환자는 사용을 중지하고 피부과 전문의에게 진단을 받도록 합니다.
5. 본 제품은 용도 이외에 사용이나 비전문가의 사용을 금합니다.
6. 치과의사 및 치료 관련 전문의만 사용해야 합니다.
7. 어린이, 노인 등 치료 사용자가 아닌 사람의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
8. 제조번호 및 유효기간을 확인한 후 사용합니다.
9. 제품 파손 우려가 있으니, 과도한 충격을 주지 마십시오.
10. 본 제품 사용 시, 구성품 외에는 사용하지 마십시오.

※ 한번 사용한 팁은 반드시 제거하시고, 새로운 팁으로 교체하여 사용하시기 바랍니다.


■ 부작용

부작용은 다음을 포함하지만 이에 국한되지 않습니다.

1. 경미한 따가움, 작열감, 일시적 자극감이 있을 수 있습니다.
2. 알레르기 반응(발진, 부종, 호흡곤란 등)이 발생할 경우 즉시 사용을 중지하고, 의료진의 진료를 받도록 안내하십시오.
3. 과도한 적용 또는 잔류 시, 점막 손상 및 이차 감염 가능성이 있습니다.

■ 보관방법

1. 직사광선에 노출되지 않는 곳에 보관하십시오.
2. 1-30°C 온도에서 보관하십시오.

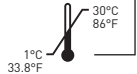

■ 구성

- 【#】 1101-1 One-Stop Blue 0.85g x 7syringes, Disposable tips
- 【#】 1101-2 One-Stop Blue 0.85g x 2syringes, Disposable tips

■ 유효기간

제조일로부터 2년

부작용 보고 관련 문의처 (한국의료기기안전정보원 080-080-4183)

One-Stop is a paste-type dental pre-treatment material applied into the gingival sulcus to remove blood and crevicular fluid, and to temporarily expand the sulcus. It is intended to assist in obtaining accurate and clear dental impressions.

■ Indications

1. Local hemostasis and moisture control in the gingival sulcus
2. Pre-treatment prior to prosthetic impressions or restorations
3. Prior to core buildup for gingival retraction
4. To secure clear visibility before adhesive procedures

■ Composition

An aluminum chloride-based astringent agent

■ Application method

1. Before the application
 - ① Check the expiration date and ensure the package is not contaminated.
 - ② Follow the instructions before using it.
 - ③ When ready to administer the procedure to the patient, remove the cap of the product.



④ Be sure to wear respiratory protection before the procedure.

2. Applications

1) Check application site

- ① Assess the condition of the gingival sulcus and surrounding tissues.
- ② If necessary, gently remove debris, blood, or fluid to clean the site.
- ③ Ensure that the application site is free of active infection, severe inflammation, or ulcers.

2) Application

- ① Slowly apply One-Stop using the tip to the desired are.
- ② Apply enough material to fill the gingival sulcus.
Avoid excessive injection.
- ③ Add a small amount if necessary to ensure even coverage.

3) Application time

Leave the product in place for approximately 2–3 minutes.
During this time, the material absorbs fluid and minor bleeding, and induces temporary gingival sulcus expansion via astringent action.

4) Removal

- ① After 2–3 minutes, rinse thoroughly with clean water or saline.
- ② Use gentle water pressure to ensure complete removal of any remaining material.
- ③ If residue remains, remove with a suction tip or air-water spray.

5) Post-procedure

- ① After rinsing is complete, proceed with impression taking.
- ② Reassess the oral cavity to ensure there is no mucosal damage or hypersensitivity.
- ③ Do not reuse the syringe or tip. Dispose of used items as medical waste.

■ Contraindications

1. Do not use in patients with hypersensitivity or a history of allergic reactions to any components of the product (e.g., aluminum chloride).
2. Do not apply to areas with active infections, severe periodontitis, gingival ulcers, or open wounds.
3. Do not use in children under 3 years of age or in patients with significantly compromised immune function.
4. Reuse of the enclosed tip may cause cross-infection, so the reuse of the tip is prohibited.

■ Cautions

1. For dental use only.
2. Do not use in patients with a known history of hypersensitivity such as rash or dermatitis caused by this product.
3. This product is intended for use only on oral tissues.
4. If hypersensitivity symptoms such as rash occur during use, discontinue use and consult a dermatologist.
5. This product is prohibited for any use other than its intended purpose, and use by non-professionals is not allowed.
6. Follow the procedure and observe all precautions.

7. Keep out of reach of non-dental users, including children an elderly.
8. Always check the lot number and expiration date before use.
9. Handle with care to prevent product damage, avoiding excessive impact.
10. Use of this product other than components is prohibited.

※ After each use, the dispensing tip must be removed and replaced with a new tip before further application.


■ Adverse reactions

Adverse reactions may include, but are not limited to :

1. Mild stinging, burning sensation, or temporary irritation.
2. Allergic reactions such as rash, swelling, or difficulty breathing discontinue use immediately and consult a medical professional.
3. Excessive application or residue may cause mucosal damage or secondary infection.

■ Storage

1. Avoid exposure to direct sunlight.
2. Store at temperature between 1°C and 30°C.

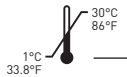

■ Contents

- # 1101-1 One-Stop Blue 0.85g x 7syringes, Disposable tips
- # 1101-2 One-Stop Blue 0.85g x 2syringes, Disposable tips

■ Shelf-life

2 years from the date of manufacture

SYMBOLS

: Use-by date	: Batch code
: Caution	: Keep Dry
: Manufacturer	: Date of Manufacture
: Authorized Representative in the European Community	
: Temperature limit	: Consult instruction for use
: Keep away from sunlight	: Catalogue number
: Country of manufacture	: Model number
: Unique device identifier	: Medical device
: Do not re-use	: Non-sterile device

■ MEDICLUS CO., LTD.

No.1210, 134, Gongdan-ro, Heungdeok-gu, Cheongju-si,
Chungcheongbuk-do 28576, Republic of Korea
Tel. +82-43-211-2877 / Fax. +82-43-211-2866
E-mail : sales@mdclus.com